



УШНОЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР

DT-886

Руководство по эксплуатации v.2010-04-02 AMV

Ушной инфракрасный термометр DT-886 предназначен для безопасного измерения температуры в ушном канале у ребенка или взрослого человека, а также для бесконтактного измерения температуры поверхности, например, детского молока или воды в ванне.

Прибор не содержит излучающих устройств и соответствует европейским клиническим стандартам. Принцип работы заключается в определении величины тепла, исходящего от человека (пирометрический метод).

ОСОБЕННОСТИ

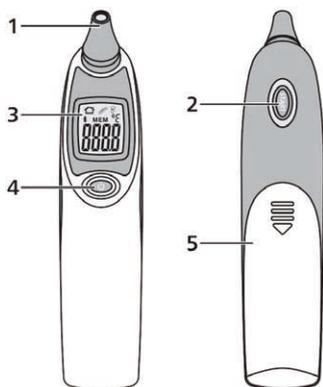
- **Многофункциональность** - измерение температуры в ушном канале у ребенка или взрослого человека; бесконтактное измерение температуры поверхности
- Точность измерения температуры у человека $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Идеально подходит для измерения температуры у детей
- **Безопасность измерения** - прибор не содержит излучающих устройств, ртути и стекла
- **Быстрота измерения** - время замера всего 1-2 с
- **Удобство измерения в ушном канале** по сравнению с другими контактными способами
- **Соответствие европейским клиническим стандартам EN 12470-5 и ASTM E-1965-1998**
- ЖК-дисплей с подсветкой (подсветка включается на 4-5 с после включения и окончания измерения)
- Запоминание результатов 12 последних измерений
- Звуковая сигнализация работы
- Индикатор разряда батареи
- Автоматическое выключение после 1 минуты бездействия



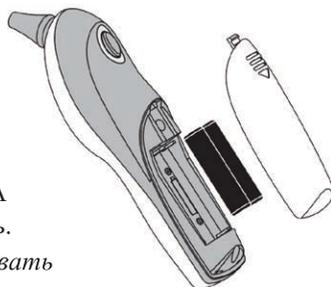
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон и погрешность измерения температуры	<ul style="list-style-type: none">• человек: $32,0...42,9^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$• поверхность: $0,0...100,0^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
Разрешение индикации	0,1 $^{\circ}\text{C}$
Память (автозапоминание)	12 значений
Питание прибора	2 элемента питания типа AAA
Условия эксплуатации	10...40 $^{\circ}\text{C}$, $\leq 80\% \text{RH}$
Размеры	155 x 33 x 45 мм
Вес (с элементами питания)	87 г

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА



1. Измерительный шуп
2. Кнопка **START** - начало измерения
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка ⏻ - вкл./выкл. прибора
5. Батарейный отсек

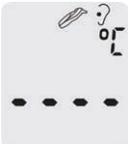
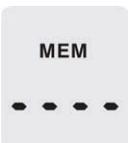


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

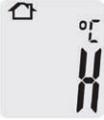

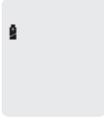
1. Установите 2 элемента питания типа ААА в батарейный отсек, соблюдая полярность.
*Производитель **не рекомендует** использовать перезаряжаемые аккумуляторы.*
2. Для удовлетворения нормам гигиены измерительный шуп следует протирать небольшим кусочком ваты, смоченным в спирте, до/после использования. При этом спирт не должен попадать в отверстие шупа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Дисплей	Описание
	<p>1. Включение и инициализация прибора</p> <p>1.1. Для вкл./выкл. прибора нажмите кнопку ⏻.</p> <p>1.2. После включения на дисплее в течение 2-3 секунд будут отображаться все индикаторы.</p> <p>1.3. Прибор выключится автоматически спустя 1 минуту с момента последнего измерения.</p>
	<p>2. Индикация результата прошлого измерения</p> <p>После включения и инициализации на дисплее в течение 2-3 секунд будет отображаться результат последнего измерения и индикатор MEM.</p>
	<p>3. Готовность к измерению температуры</p> <p>После короткого звукового сигнала прибор готов к измерению температуры. Индикатор $^{\circ}\text{C}$ будет мерцать.</p>

Дисплей	Описание
	<p>4. Измерение температуры у человека</p> <p>4.1. Для начала измерения аккуратно введите щуп в ушной канал (неглубоко) и нажмите кнопку START.</p> <p>4.2. После продолжительного звукового сигнала щуп можно извлечь. На дисплее появится измеренное значение.</p> <p>4.3. Повторите процедуру при необходимости.</p> <p><i>Для обеспечения точности измерения после каждого 3-5 замеров рекомендуется делать перерыв 30 с.</i></p>
	<p>5. Измерение температуры поверхности</p> <p>5.1. Для начала измерения наведите отверстие измерительного щупа непосредственно на исследуемую поверхность и нажмите кнопку START.</p> <p>5.2. После продолжительного звукового сигнала на дисплее появится измеренное значение.</p> <p>5.3. При выходе измеренного значения за пределы 32,0...42,9°C появится индикатор .</p> <p><i>Не следует осуществлять измерение через стекло или другие прозрачные поверхности.</i></p>
	<p>6. Индикация разряда батареи</p> <p>При появлении на дисплее мерцающего индикатора  замените батарею.</p>
	<p>7. Смена единиц измерения °C/°F</p> <p>7.1. Выключите прибор (кнопка .</p> <p>7.2. Нажмите и удерживайте кнопку START в течение 5 с. На дисплее появится мерцающий индикатор °C (°F).</p> <p>7.3. Для смены единиц нажмите кнопку START.</p> <p>7.4. Прибор перейдет в режим измерения (с выбранными единицами) автоматически после 2-3 с бездействия.</p>
 	<p>8. Просмотр результатов 12 последних измерений</p> <p>8.1. Выключите прибор (кнопка .</p> <p>8.2. Нажмите кнопку START. На дисплее появится мерцающий индикатор MEM.</p> <p>8.3. Для просмотра результата последнего измерения нажмите кнопку START. На дисплее появится номер активной ячейки памяти, после - результат измерения.</p> <p>8.4. Для выбора следующей ячейки нажмите кнопку START ещё раз. Всего доступно 12 ячеек памяти.</p> <p>8.5. Для выхода нажмите кнопку . Прибор выключится.</p>

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Вид А	Описание	Вид В
	<p>A. Измеренное значение температуры больше допустимого (100°C).</p> <p>B. Измеренное значение температуры меньше допустимого (0°C).</p>	
	<p>A. Температура окружающей среды выше допустимой (40°C).</p> <p>B. Температура окружающей среды ниже допустимой (10°C).</p>	
	<p>A. При отсутствии на дисплее всех индикаторов проверьте правильность установки элементов питания.</p> <p>B. При отсутствии на дисплее всех индикаторов, <i>кроме индикатора разряда батареи</i>, замените элементы питания.</p>	
	<p>A. Ошибка функционирования. Выключите и вновь включите прибор. Если это не помогло, обратитесь в службу гарантийного обслуживания.</p>	

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

1. 1 короткий - прибор готов к измерению (после включения).
2. 1 продолжительный - окончание измерения.
3. 3 коротких - ошибка функционирования.
4. 10 коротких - измеренная у человека температура выше 37,5°C.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Прибор | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

ООО "ЛАНФОР РУС"
 г.Санкт-Петербург,
 пр.Малоохтинский, д.68
 +7 (812) 309-05-12
 +7 (499) 703-20-73
 +7 (343) 236-63-20
 E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>